

Equipo Pericraneal (Scalp Vein)



Tubo Flexible

Tubo de PVC de grado médico y de 30 cm de longitud. No colapsable.

Perfecto Acople

El diseño de las uniones del equipo asegura la no filtración de líquidos.

Aletas Flexibles de Soporte


Suaves y diseñadas para fijarse fácilmente a la piel.

Aguja de Pared Delgada Acoplada


Triple biselada para corte más limpio. Asegura una completa hermeticidad. Electropulida para remover relieve.

Presentación


Aguja - 19G x 3/4"
Aguja - 19G x 1 1/8"

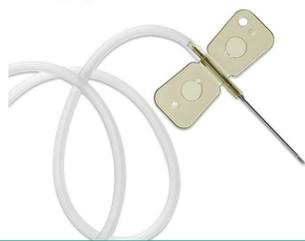


Aguja - 21G x 3/4"
Aguja - 21G x 1 1/8"

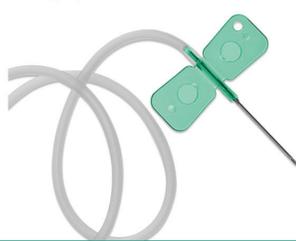

Aguja - 23G x 3/4"
Aguja - 23G x 1 1/8"

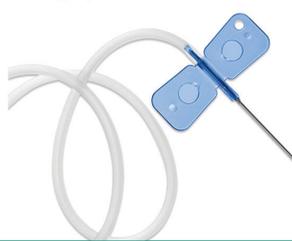

Aguja - 25G x 3/4"

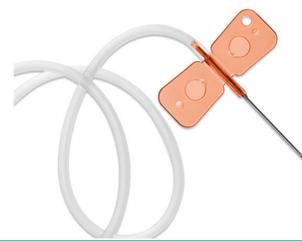

Equipo Pericraneal (Scalp Vein)



Equipo de infusión pericraneal estéril compuesto de una aguja de infusión intravenosa con aletas que aseguran la venopuntura, cuando se fijan a la piel. Las aletas son suaves y flexibles, diseñadas para sujetarse fácilmente.

Su función es penetrar al tejido y permitir el suministro de soluciones parenterales al organismo (fluidos o fármacos en solución).

Componentes y Material

- ✓ Gorro protector y tubo flexible de policloruro de vinilo (PVC) de grado médico, translúcidos y perfectamente acoplables entre sí.
- ✓ Aguja de acero inoxidable con soporte en polietileno (PE) y aletas flexibles de soporte, identificada con colores, fabricadas en PVC.

Perfecto acople

- ✓ Tubo flexible de 30 cm de longitud, no colapsable. Acople perfecto entre uniones del equipo que asegura la no filtración de líquidos.

Esterilización y Vida Útil

- ✓ Blíster individual esterilizado con gas de Óxido de Etileno (EO). No tóxica. Libre de látex y pirógenos. Duración de 5 años garantizada.

Función

- ✓ Para uso de infusiones y transfusiones. Permite suministro de fluidos o fármacos en solución al paciente.

Certificación

- ✓ Cumple y excede requerimientos de calidad de la norma internacional ISO 13485:2016 y MDD 93/42/CEE.

Especificación		Producto		Color	Longitud (in)			Presentación
mm	gauge	Tamaño	Código	Color	3/4"	1"	1 1/8"	
1,10	19G	19G x 3/4"	GM121901	Amarelo				Caja x 100 Unds. Bulto x 2.000 Unds. (20Cajas)
		19G x 1 1/8"	GM121902	Amarelo				
0,80	21G	21G x 3/4"	GM122101	Verde				
		21G x 1 1/8"	GM122102	Verde				
0,60	23G	23G x 3/4"	GM122301	Azul				
		23G x 1 1/8"	GM122302	Azul				
0,50	25G	25G x 3/4"	GM122501	Naranja				

