

Equipo de Infusión con Bureta



Dosificación Exacta

Cuenta con sitio de inyección en "Y" para el suministro de soluciones y filtro en cámara de microgoteo.

Escala Clara y Precisa


Cuenta con números grandes y oscuros para una rápida y precisa medición de volumen.

Válvula de Corte Automática

Previene la acumulación de aire en la línea de fluidos, una vez que la cámara se vacía.

Fácil Visualización del Contenido

Cámara transparente y tubo de infusión, flexible y resistente de 1,60 m de longitud.

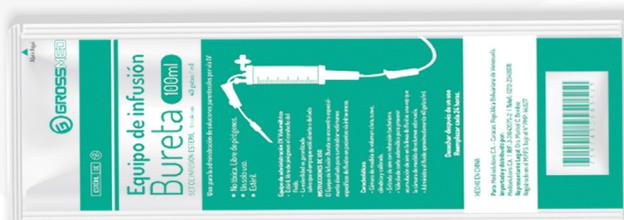

Capacidad	Código	Presentación
100 mL	GM030100	Paquete x 5 Empaques individuales. Bulto x 100 Unds (20 Paquetes).
150 mL	GM030150	

Equipo de Infusión con Bureta



Dispositivo médico desechable indicado para la administración endovenosa de soluciones líquidas estériles. Permite el acceso al torrente sanguíneo para suministrar soluciones y medicamentos indicados por un médico.

Está indicado para volúmenes menores a 50 ml/hora. Su diseño equivale a 40 gotas por 1 mL. La bureta permite la mezcla y dosificación exacta de la solución que requiere el paciente.

Componentes y Material

Material

Diseño

Esterilización y Vida Útil

Accesorios

Certificación

- ✓ Cámara transparente de policloruro de vinilo (PVC) de grado médico, con escala de fácil lectura, con capacidad para 100 y 150 mL.
- ✓ Tubo de infusión de PVC, flexible y resistente, con 1,60 m de longitud aproximadamente que garantiza la comodidad del paciente.
- ✓ Cuenta con filtro en cámara de microgoteo de partículas de 15 µm. Diseñada con válvula de corte automática que previene la acumulación de aire en la línea de fluidos, una vez que la cámara se vacía.
- ✓ Empaque individual esterilizado con gas de Óxido de Etileno (EO). No tóxica. Libre de látex y pirógenos. Duración de 5 años garantizada.
- ✓ El extremo del equipo puede ser opcional para emplear apertura o cierre tipo Luer Lock. Cuenta con sitio de inyección en "Y" para el suministro de soluciones.
- ✓ Cumple y excede requerimientos de calidad de la norma internacional ISO 13485:2001 y MDD 93/42/CEE.



Capacidad	Código	Presentación
100 mL	GM030100	Paquete x 5 Empaques individuales. Bulto x 100 Unds (20 Paquetes).
150 mL	GM030150	