

TERMÓMETRO MÉDICO INFRARROJO DIGITAL XINQI

dovant®

LCD Display

Cabeza de detección infrarroja

Botón de -


Botón de +

Botón de ajustes

Botón de medición

Cubierta de baterías

Método de Medición

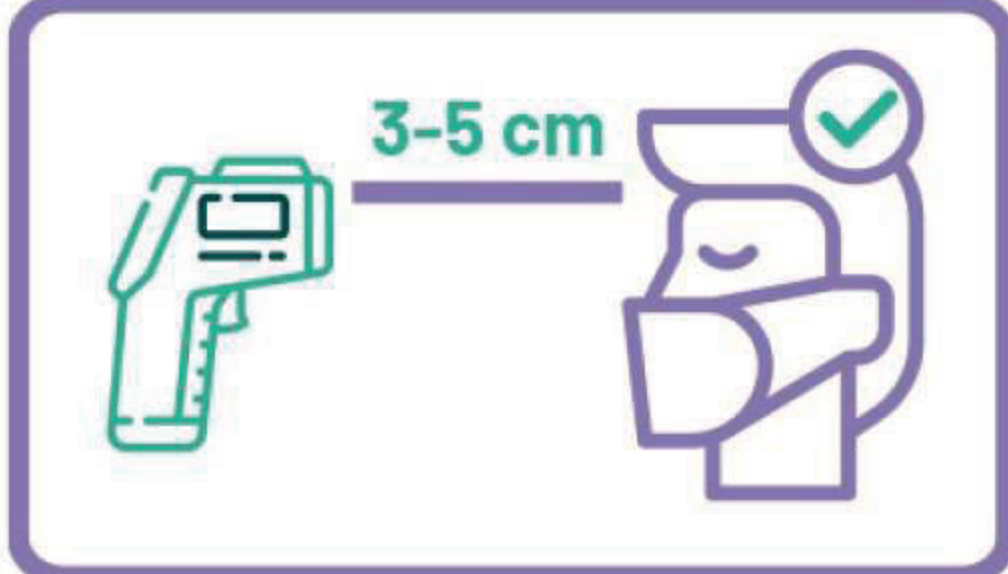

32.0°C ≤ T < 37.3°C Verde

37.4°C ≤ T < 38.0°C Amarillo

38.1°C ≤ T < 42.9°C Rojo

- Instrumento infrarrojo de alta precisión, estable, fehaciente desempeño.
- Gran adaptabilidad a las temperaturas y puede utilizarse normalmente en ambientes complejos.
- Medición precisa.
- Dos modos diferentes para medir temperatura. El botón de modo cambia las modalidades de manera conveniente y práctica.
- Sonido y pantalla de color.

La luz del led cambia de acuerdo al rango de temperatura de la medición para mayor comodidad y seguridad.

Este producto mide la temperatura corporal recolectando la radiación térmica infrarroja de la frente de un ser humano. La operación es simple e higiénica y la medición es rápida y precisa. El usuario solo necesita apuntar el sensor a la frente de la persona y presionar el gatillo. La temperatura será medida en un segundo.

Este producto es un aparato médico tipo 2, el cual pertenece a una categoría con fuente de poder interna. Adicionalmente es tipo B y la protección es ordinaria (IP20).

No use en presencia de gases inflamables, oxígeno nitroso, gases mezclados.



PRESENTACIÓN DE VENTA: CAJA (1 UND.)

dovant®